

Multiplex® Classic

Generador de ondas múltiples y diadinámicas para electroterapia.



El **Multiplex® Classic**, equipo de moderna concepción y tecnología de avanzada, permite por su gran versatilidad y facilidad de manejo una amplia gama de opciones terapéuticas, ocupando un lugar de importancia dentro del equipamiento profesional en el campo de la medicina física y estética.

Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.



MEDITEA



www.meditea.com

Multiplex® Classic




Descripción general y formas de uso.

El **Multiplex® Classic** es un generador de corrientes diversas y ondas diadinámicas, de múltiples usos en tratamientos que requieran variadas formas de electroterapia. Las distintas formas de onda generadas poseen la cualidad de ser moduladas en forma amortiguada, cuyas suaves pendientes de ascenso y descenso posibilitan la perfecta tolerancia en todo tipo de paciente, aún en los hipersensibles.

Una de las características sobresalientes del **Multiplex® Classic** es la que posibilita accionar a la onda seleccionada, conjuntamente con una corriente galvánica pura [galvanoterapia], cuyas virtudes terapéuticas la hacen apta para actuar farmacológicamente por iontoforesis, siendo esta modalidad la que da lugar a la creación de ondas diadinámicas.

La corriente galvánica también puede ser utilizada en forma independiente de la electroporación.

El **Multiplex® Classic** dispone de 6 canales de salida totalmente independientes entre sí, lo que permite actuar en diversas zonas corporales al mismo tiempo, y modificar las intensidades de cada uno de los canales utilizados, sin que los mismos interactúen o se perturben.

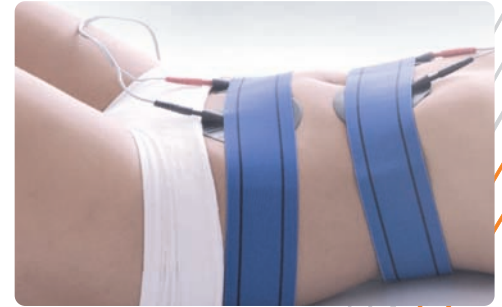

Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.



Multiplex® Classic es un diseño exclusivo de Meditea Electromédica S.R.L.

Viamonte 2255 / 2265 - Buenos Aires - Argentina - CP (C1056ABI)
Tel. 54-11 4953-6114 / 4951-9079 / Fax 4953-6111

www.meditea.com

ventas@meditea.com info@meditea.com